

DEC CYCLE®

Steriles Desinfektionsmittel auf Phenolbasis

PMT
www.pmt.eu

DEC-CYCLE® ist ein steriles, keimtötendes Desinfektionsmittel, welches auf einer Phenolverbindung mit niedrigem pH basiert.

Es ist phosphatfrei und stark genug um ein breites Spektrum von pathogenen und nichtpathogenen Keimen zu töten.

Dabei ist es mild genug, um negative Korrosionseffekte auf die desinfizierte Oberfläche zu verhindern.

Anwendung

DEC-CYCLE® wird als breitbandiges Desinfektionsmittel eingesetzt, wenn nur moderate Mengen an organischem Feststoff vorhanden sind. Typische Anwendungen sind die Desinfektion von Wänden, Decken und Böden, wenn ein steriles Reinigungsmittel auf Phenolbasis gewünscht wird. Typische Verdünnungen des Konzentrates sind 1:256 und typische Einwirkzeiten 10 Minuten (bei 20 Grad C).

DEC CYCLE® wird typisch im Zusammenspiel mit **DEC-PHENE®** angewendet, um alternierende Desinfektionsmittel auf Phenolbasis einsetzen zu können.

Verpackungseinheiten

DEC-CYCLE® ist einerseits als Konzentrat zur Einmaldosierung in 29,5 ml, 59 ml und 118 ml (1, 2, 4 oz) Flaschen erhältlich, andererseits kann auch ein Kontainer mit 3,78 Liter (1 Gallone) Konzentrat zur Mehrfachdosierung geliefert werden. Die Verpackung für Einmaldosierung garantiert jederzeit die Verwendung eines tatsächlich sterilen Produktes. Die aufwändige Validierung der Sterilitäterhaltung bei Mehrfachöffnung eines Behälters entfällt somit.

Details dazu auf der Rückseite des Datenblattes.

Validierung

DEC-CYCLE® wird mit umfassender Dokumentation geliefert.


Neben Validierungsberichten gehört dazu:

- Sicherheitsdatenblatt
- Analysezertifikat
- Zertifikat Sterilisierung



- Phenolbasiertes Desinfektionsmittel
- Steriles Produkt
- Einwirkzeiten typisch 10 Minuten (temperaturabhängig)
- Auch zur Einmaldosierung erhältlich
- A.O.A.C getestet
- Doppelt verpackt zum Einsatz in A / B Zonen
- Filtrierung bei 0,2 Mikrometer
- Vollständige Produktdokumentation inklusive Validierungsberichte

Germany - GB Together we create Solutions France - Benelux

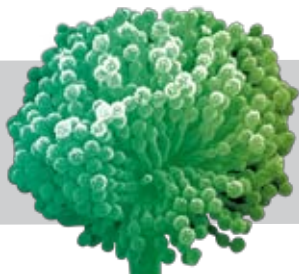

DEC CYCLE®

Steriles Desinfektionsmittel auf Phenolbasis

PMT
www.pmt.eu

Varianten

Produktnummer	Beschreibung	Gebindegröße
DCY-01	DEC CYCLE® 1 Gallone Kanister (3,78 Liter) unsteril	4 Stück
DCY-02	DEC CYCLE® 1 Gallone Kanister (3,78 Liter) steril	4 Stück
DCY-03-4Z	DEC CYCLE® 4 oz Flasche (118 ml) steril	24 Stück
DCY-03-2Z	DEC CYCLE® 2 oz Flasche (59 ml) steril	24 Stück
DCY-03-1Z	DEC CYCLE® 1 oz Flasche (29,5 ml) steril	24 Stück

DEC^x - Das Dekontaminationsprogramm

Tag(e)	Basis: Phenole	Basis: Quaternäres Ammonium	Basis: Wasserstoffperoxid
1 - 13	DEC PHENE®	DEC QUAT®	STERI PEROX®
14	DEC CLEAN® gefolgt von HYPO CHLOR® 0,52% oder STERI PEROX® oder DEC SPORE®200	DEC CLEAN® gefolgt von HYPO CHLOR® 0,52% oder STERI PEROX® oder DEC SPORE®200	DEC CLEAN® gefolgt von HYPO CHLOR® 0,52% oder STERI PEROX® oder DEC SPORE®200
15 - 29	DEC PHASE® oder DEC CYCLE®	DEC QUAT®	STERI PEROX® oder DEC QUAT®
30	DEC CLEAN® gefolgt von HYPO CHLOR® 0,52 oder STERI PEROX® oder DEC SPORE® 200	DEC CLEAN® gefolgt von HYPO CHLOR® 0,52 oder STERI PEROX® oder DEC SPORE® 200	DEC CLEAN® gefolgt von HYPO CHLOR® 0,52 oder STERI PEROX® oder DEC SPORE® 200
1	Neustart von Tag 1	Neustart von Tag 1	Neustart von Tag 1

Nach der Desinfektion sollten alle kritischen Oberflächen mit heißem WFI (water for injection) gespült oder ein nasses Abwischen mit IPA (Isopropylalkohol) durchgeführt werden.